

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТСКИХ ВЕСОВ СО  
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШКАЛОЙ  
МОДЕЛЬ: 7464, 7474**

1. **Область применения:** взвешивание детей в специальном ложементе

2. **Максимальный вес – 13 кг, дискретность – 10 г**

3. **Использование весов:**

а) Поставить весы на ровную горизонтальную поверхность. Установить килограммовые и граммовые гири в нулевое положение. Осторожно зафиксировать ось килограммовой гири в соответствующей прорези. Разомкнуть шкалу обратным движением рукоятки замка справа от шкалы. Точная регулировка шкалы осуществляется скольжением вправо или влево противовеса, расположенного на обратной стороне весов (рис.1).

б) Ложемент должен быть зафиксирован на кронштейне в соответствии с изображением (рис.2). Для установки ложемента использовать два прилагающихся винта. Винты разработаны таким образом, что обеспечивают нулевую установку весов.

4. **Взвешивание:**

Положить ребенка в ложемент. Затем передвигать килограммовую и граммовую гири до установки стрелки в положение равновесия. Ось килограммовой гири всегда должна фиксироваться в соответствующей прорези. Вес ребенка есть сумма килограммового и граммового значений. После окончания взвешивания установить весы на ноль и запирающее устройство в первоначальное положение.

5. **Внимание!**

Не перегружать весы, не нагружать слишком быстро, не подвергать постоянному действию влаги, не подвергать воздействию агрессивных веществ.

Производить взвешивание в горизонтальном положении на ровной, чистой, сухой поверхности.

6. **Хранение:**

Весы не требуют специальных условий хранения. Очищать сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки не использовать средства, содержащие растворитель.

Весы предназначены для бытового использования.

Рис.1


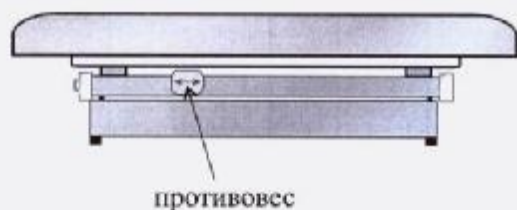


Рис.2

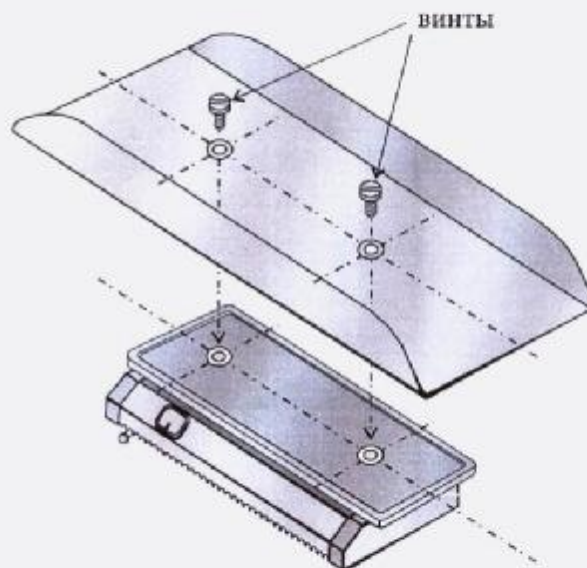

Допустимая погрешность: 0 кг – 0,5 кг ± 20 г  
3 кг – 8 кг ± 120 г

0,5 кг – 3 кг ± 80 г  
8 кг – 13 кг ± 180 г